

Propolis Neusspray

Met Tijm & Eucalyptus - Zoutoplossing

Medisch Hulpmiddel

Propolis Neusspray met Tijm & Eucalyptus is een medisch hulpmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Het bevat een zoutoplossing met 1% natriumchloride en is bedoeld voor het reinigen van de neus. Deze neusspray helpt bij het verwijderen van overtollig slijm en ondersteunt bij aandoeningen zoals rhinitis (neusontsteking), verkoudheid, griep en andere luchtweginfecties. Daarnaast bevat het propolis-, tijm- en eucalyptus-extracten, die zorgen voor een frisse en aangename geur.

Samenstelling:

Gezuiverd water, natriumchloride (1%), propolis glycerine-extract, EDTA dinatriumzout dehydraat, tijm glycerine-extract, benzalkoniumchloride, eucalyptus vloeibaar extract, natriumhydroxide.

Gebruiksaanwijzing:

1. Schud de fles voor gebruik en verwijder de beschermcap. Bij het eerste gebruik kan het nodig zijn om meerdere keren op de applicator te drukken totdat het product verstuit.
2. Breng de neusapplicator voorzichtig in één neusgat en druk op het pompje om het product met een lichte massage op het gebied aan te brengen.
3. Laat de overtollige oplossing uitlekken om het slijm te verwijderen en snuit dan uw neus.
4. Herhaal het proces met het andere neusgat.
5. Reinig de punt met water en droog hem af.
6. Bedek de neusapplicator met de beschermcap tot het volgende gebruik.

Aanbevolen dosering:

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 of 2 verstuivingen, 2 tot 3 keer per dag in elk neusgat indien nodig.

Contra-indicaties en bijwerkingen:

- Er zijn geen bijwerkingen beschreven bij de aanbevolen therapeutische doses, maar als u bijwerkingen ervaart, raadpleeg dan uw gebruikelijke arts of apotheker.
- De eerste behandeling kan een waterige loopneus veroorzaken. Dit is een normale en natuurlijke reactie op de werking van de componenten.
- Elke ernstige bijwerking met betrekking tot dit product moet worden gemeld aan de fabrikant, distributeur en nationale gezondheidsinstantie in uw land.
- Bij de aangegeven dosering zijn geen interacties bekend. Het is ook aan te raden om met uw arts te overleggen als u medicijnen gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Om hygiënische redenen en om de overdracht van ziekteverwekkers te voorkomen, mag deze verpakking niet door meer dan één persoon worden gebruikt.
- In geval van bekende of vermoede allergie voor een van de bestanddelen van dit medische hulpmiddel wordt als voorzorgsmaatregel geadviseerd het hulpmiddel niet te gebruiken.

- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bewaren en vervaldatum:

- Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die op de doos en de fles staat.
- Bewaar op een droge en koele plaats. Onder 40°C bewaren.
- Binnen 90 dagen na eerste opening gebruiken.
- Deponeer de fles en de beschermcap in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
- Het wordt aanbevolen om het doosje of de bijsluiter niet weg te gooien tijdens het gebruik van het product.

Inhoud:

Spray zonder drijfgas in een flesje van 20 ml met neusapplicator.

Datum van uitgifte: 29-07-2024. Versie 04.



Spray Nasal À La Propolis, Au Thym Et À L'eucalyptus - Solution Saline

Dispositif Médical

Le spray nasal à la propolis, au thym et à l'eucalyptus est un dispositif médical destiné aux adultes et aux enfants âgés de 12 ans et plus. Il contient une solution saline avec 1 % de chlorure de sodium et est destiné au lavage nasal. Ce spray nasal aide à éliminer l'excès de mucus et soulage les affections telles que la rhinite (inflammation nasale), le rhume, la grippe et d'autres infections respiratoires. Il contient également de la propolis et des extraits de thym et d'eucalyptus, qui lui donnent un parfum frais et agréable.

Composition :

Eau purifiée, chlorure de sodium (1 %), extrait de glycérine de propolis, sel EDTA disodique déshydraté, extrait de glycérine de thym, chlorure de benzalkonium, extrait liquide d'eucalyptus et hydroxyde de sodium.

Mode d'emploi :

1. Agitez le flacon avant utilisation et retirez le bouchon de protection. Lors de la première utilisation, il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur l'applicateur jusqu'à ce que le produit soit pulvérisé.
2. Insérez délicatement l'applicateur nasal dans une narine et appuyez sur la pompe pour appliquer le produit sur la zone en effectuant un léger massage.
3. Laissez s'écouler l'excédent de solution pour éliminer les mucosités, puis mouchez-vous.
4. Répétez l'opération avec l'autre narine.
5. Nettoyez le bout avec de l'eau et séchez-le.
6. Couvrez l'applicateur nasal avec le bouchon de protection jusqu'à la prochaine utilisation.

Dosage recommandé :

Pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans : 1 ou 2 pulvérisations, 2 à 3 fois par jour dans chaque narine selon les besoins.

Contre-indications et effets secondaires :

- Aucun effet secondaire n'a été décrit aux doses thérapeutiques recommandées, mais si vous ressentez des effets secondaires, consultez votre médecin ou pharmacien habituel.

- Le premier traitement peut provoquer un écoulement nasal aqueux. Il s'agit d'une réaction normale et naturelle à l'action des composants.
- Tout effet indésirable grave lié à ce produit doit être signalé au fabricant, au distributeur et à l'autorité sanitaire nationale de votre pays.
- Aux doses indiquées, aucune interaction n'est connue. Il est également conseillé de consulter votre médecin si vous prenez des médicaments.

Avertissements et précautions :

- Pour des raisons d'hygiène et pour éviter la transmission de pathogènes, ce récipient ne doit pas être utilisé par plus d'une personne.
- En cas d'allergie connue ou suspectée à l'un des composants de ce médicament, il est conseillé de ne pas utiliser le médicament par mesure de précaution.
- Tenir hors de portée des enfants.

Stockage et date de péremption :

- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur la boîte et le flacon.
- Conserver dans un endroit sec et frais. Conserver à une température inférieure à 40 °C.
- À utiliser dans les 90 jours après la première ouverture.
- Jeter le flacon et le bouchon de protection dans les conteneurs de déchets appropriés.
- Il est recommandé de ne pas jeter la boîte ou la notice pendant l'utilisation du produit.

Contenu :

Spray sans gaz propulseur dans un flacon de 20 ml avec applicateur nasal.

Date de révision : 29-07-2024. Version 04.



Propolis-Nasenspray Mit Thymian & Eukalyptus – Kochsalzlösung

Medizinprodukt

Propolis Nasenspray mit Thymian und Eukalyptus ist ein Medizinprodukt für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren. Es enthält eine Kochsalzlösung mit 1 % Natriumchlorid und ist für die Reinigung der Nase bestimmt. Dieses Nasenspray hilft, überschüssigen Schleim zu beseitigen und wirkt unterstützend bei Erkrankungen wie Rhinitis (Nasentzündung), Erkältungen, Grippe und andere Infektionen der Atemwege. Außerdem enthält es Propolis-, Thymian- und Eukalyptus-Extrakte, die für einen frischen und angenehmen Duft sorgen.

Zusammensetzung:

Gereinigtes Wasser, Natriumchlorid (1 %), Propolis-Glycerin-Extrakt, Dinatriumsalz-EDTA-Dehydrat, Thymian-Glycerin-Extrakt, Benzalkoniumchlorid, Eukalyptus-Flüssigextrakt und Natriumhydroxid.

Anwendung:

1. Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch und entfernen Sie die Schutzkappe. Bei der ersten Anwendung muss der Applikator gegebenenfalls mehrmals betätigt werden, bis das Produkt austritt und zerstäubt werden kann.
2. Führen Sie den Nasenapplikator vorsichtig in ein Nasenloch ein und drücken Sie auf den Pumpmechanismus, um das Produkt leicht massierend auf den betroffenen Bereich aufzubringen.

3. Lassen Sie die überschüssige Lösung ablaufen, um den Schleim zu beseitigen, und putzen Sie sich dann die Nase.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Nasenloch.
5. Reinigen Sie die Applikatorspitze mit Wasser und trocknen Sie sie ab.
6. Bedecken Sie den Nasenapplikator bis zur nächsten Anwendung mit der Schutzkappe.

Empfohlene Dosierung:

Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: bei Bedarf 1 bis 2 Sprühstöße 2- bis 3-mal täglich in jedes Nasenloch geben.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:

- Bei Einhaltung der empfohlenen therapeutischen Dosierung wurden keine Nebenwirkungen beobachtet. Falls Sie Nebenwirkungen feststellen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Die anfängliche Behandlung kann eine laufende Nase verursachen. Dies ist eine normale und natürliche Reaktion auf die Wirkung der Inhaltsstoffe.
- Jede schwerwiegende unerwünschte Reaktion im Zusammenhang mit diesem Produkt sollte dem Hersteller, dem Händler und der nationalen Gesundheitsbehörde in Ihrem Land gemeldet werden.
- Bei Einhaltung der angegebenen Dosierung wurden keine Wechselwirkungen beobachtet. Es wird jedoch empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen, wenn Sie Medikamente einnehmen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Aus hygienischen Gründen und um die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden, sollte dieses Spray nicht von mehr als einer Person benutzt werden.
- Bei bekannter oder vermuteter Allergie gegen einen der Bestandteile dieses Medizinprodukts wird empfohlen, das Produkt vorsichtshalber nicht zu verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lagerung und Verfallsdatum:

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung und der Flasche angegebenen Verfallsdatum.
- An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Unter 40 °C aufbewahren.
- Nach dem ersten Öffnen innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
- Entsorgen Sie die Flasche und die Schutzkappe in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern.
- Es wird empfohlen, die Verpackung oder die Packungsbeilage nicht wegzuerwerfen, solange Sie das Produkt verwenden.

Inhalt:

Treibgasfreies Spray in einer 20-ml-Flasche mit Nasenapplikator.

Datum des Überarbeitungs: 29-07-2024. Version 04.


STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - +34 666 570 401
BARCELONA - SPAIN



Holland & Barrett
Piet Heinkade 171, 1019 GM, Amsterdam NL
hollandandbarrett.nl • hollandandbarrett.be

REF PL0087

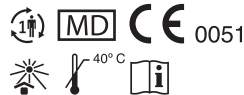

01-79300_4